



CMC
INGENIERIA MEDICA

DETECTO®

model **DR660** **PORTABLE SCALES**

PESAJE BARIÁTRICO MÓVIL

DetectoMo
del DR660
Portátil Báscu
la bariátrica

- Amplia plataforma de pesaje
- Asa de transporte integral
- Salida serie RS232
- Alfombrilla de goma antideslizante
- LCD de 1 pulgada/25 mm de altura
- Paquete de baterías recargables incorporadas






Asa de transporte
integral
Facilita el transporte

**Ideal para la asistencia
sanitaria en el
hogarpesaje de pacientes**

Diseño compacto y móvil

La báscula bariátrica portátil DR660 de Detecto cuenta con un paquete de baterías recargables incorporadas (7.2VDC / 1200mA), que puede proporcionar 8 horas de uso continuo, o 120 VAC 60Hz alimentando una fuente de alimentación de pared de 15 VDC 300mA listada por UL / CUL (incluida).

- La pantalla remota se puede montar en una pared o colocados sobre una mesa.
- El cable de la pantalla flexible se flexiona de 34 a 126 pulgadas / 86-320 cm.
- Interfaz con un PC o impresora a través de la serie puerto para una transferencia rápida de datos.
- El operador puede seleccionar tiempos opcionales para Apagado automático para conservar la vida útil de la batería.

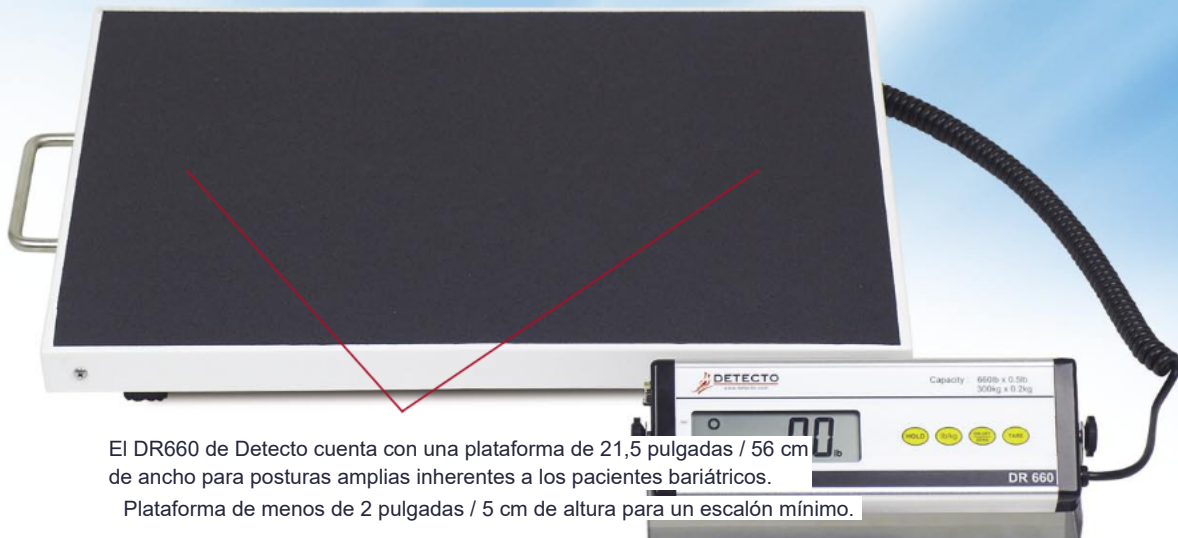

Amplia plataforma de pesaje



CAPACIDAD DE 660 LB / 300 KG

Puerto serie RS232Salida preparada para EMR/EHR de mediciones de peso.



Inclinación ajustableColoque la pantalla para obtener el mejor ángulo de visión.

LCD de 1 pulgada/25 mm de alturaLecturas de peso audaces para una fácil visibilidad.


Es posible que el peso de la tecla HOLD continúe mostrándose después de que el paciente se baje de la báscula, lo que permite Atención total al paciente antes de registrar las mediciones.

Tecla de taraÚtil cuando se necesita el peso de los artículos transportados por el paciente que se eliminará de la peso del paciente.

model **DR660** PORTABLE SCALES



Fácil configuración y alineación de pies Los pies del DR660 se pueden ajustar fácilmente con varias superficies de pesaje debido a Transporte de un lugar a otro.

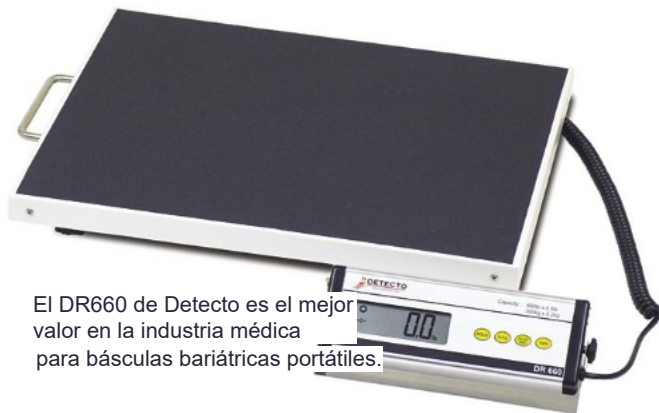

El DR660 de Detecto es el mejor valor en la industria médica para básculas bariátricas portátiles.

Capacidad: 660 lb x 0,5 lb / 300 kg x 0,2 kg	Peso Pantalla: 7 dígitos, 1 pulgada/25 mm de alto caracteres LCD
Dimensiones (pantalla) 10,63 W x 3,54 D x 1,77 H in / 27 W x 9 D x 5 H cm	Dimensiones (plataforma) 21,5 W x 17,2 D x 1,97 H in / 56 W x 44 D x 5 H cm
Longitud del cable de la pantalla Se flexiona de 34 a 126 pulgadas / 86 a 320 cm	Potencia Paquete de batería recargable incorporado (7,2 V CC/1200 mA) o 120 VCA 60 Hz que alimenta una fuente de alimentación de pared de 15 VCC y 300 mA con certificación UL/CUL (incluida)
Uso de la batería: 8 horas de uso continuo después de 14 horas de recarga	
Tara 100% de la capacidad de escala completa	Temperatura 40° a 105°F (5° a 35°C)
Humedad 25% ~95% HR	
Teclas HOLD, lb/kg, ON/ZERO/OFF, TARE	Features Indicador de batería baja.
Ahorro de energía, temporización seleccionable, apagado automático	Código UPC 809161185607
Peso del envío: 28 lb / 12,5 kg	