



**CMC**  
INGENIERIA MEDICA

**DETECTO®**

**apex**  
BÁSCULAS CLÍNICAS



# BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES CON VISOR A NIVEL DE LA VISTA

- Capacidad 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg
- Tallímetro con sonar sin contacto o mecánico en línea
- Plataforma plana extra ancha (17" de ancho x 17" de profundidad x 2.75" de altura)

Modelo APEX



**LECTURAS INSTANTÁNEAS DE PESO + ESTATURA SIN PRESIONAR UN SOLO BOTÓN**

El tallímetro con sonar sin contacto en algunos modelos apex® proporciona lecturas digitales inmediatas para una velocidad, precisión e higiene óptimas.

[www.cmcingmedica.com](http://www.cmcingmedica.com)

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681



DE MEDICIÓN  
**EFICIENTE**  
DE LOS PACIENTES  
Y DE **DISEÑO**  
**ELEGANTE**  
ESTÁ AHORA DISPONIBLE!

## TALLÍMETROS CON SONAR CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

El exclusivo tallímetro con sonar sin contacto de DETECTO detecta instantáneamente la estatura del paciente y mide a pacientes de prácticamente cualquier estatura. El tallímetro con sonar de apex mide desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 0.2 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm con incrementos de 0.5 cm (modelo APEX-SH). Simplemente párese sobre la báscula y su estatura será capturada y mostrada en el LCD dentro de un segundo.




Las básculas apex® fabricadas en EE. UU. por DETECTO miden en forma eficiente el peso y la estatura de pacientes de todas las edades y medidas.

Los modelos apex con tallímetro mecánico en línea miden desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 0.125 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm con incrementos de 1 mm (modelo APEX). Para calcular el IMC simplemente use las flechas de desplazamiento para ingresar la estatura medida y luego presione la tecla IMC.

- Cómoda visualización del peso al nivel de la vista
- Construcción resistente de la columna
- Calidad de construcción de fabricación en EE. UU. que puede apreciarse en todo el diseño de la báscula
- Se arma rápidamente con solo sacarla de la caja y en unos pocos pasos (no se requieren herramientas)
- 10 modelos estándares apex® diferentes a su elección





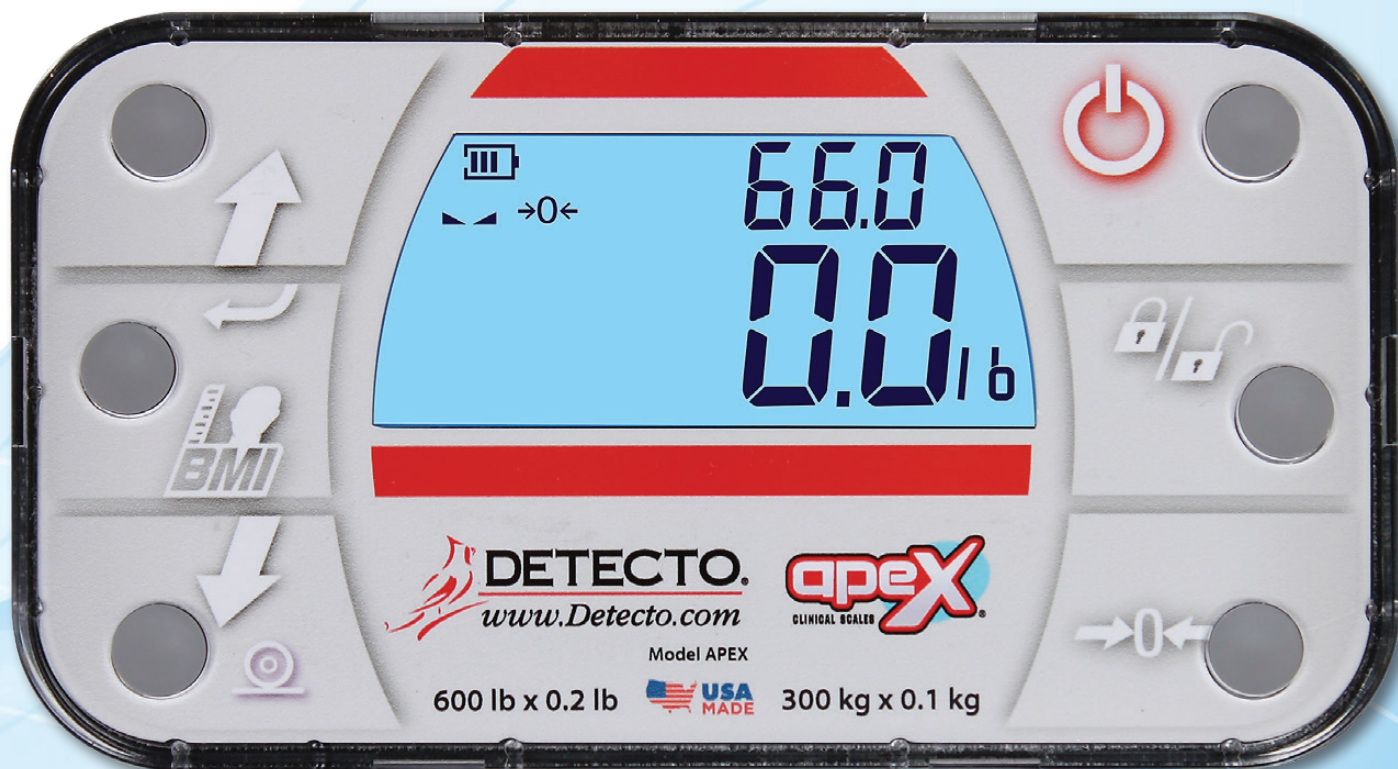


## INDICADOR DE PESO DE ALTA TECNOLOGÍA

Las básculas apex® cuentan con un indicador de alta tecnología con el estilo de un teléfono inteligente (smartphone) fácil de usar con 6 botones simples y un claro visor de LCD para lecturas en gran tamaño.

- Lecturas de peso en LCD color azul clínico de 0.75 pulgadas de altura
- Cálculo del Índice de Masa Corporal
- El peso y la estatura se muestran simultáneamente en el visor
- Mantiene bloqueado automáticamente el peso durante algunos segundos para poder visualizar y registrar fácilmente la medición
- Indicación de nivel de carga de la batería

*Ruedas duales integradas en todos los modelos apex® para que sea fácil de transportar.*

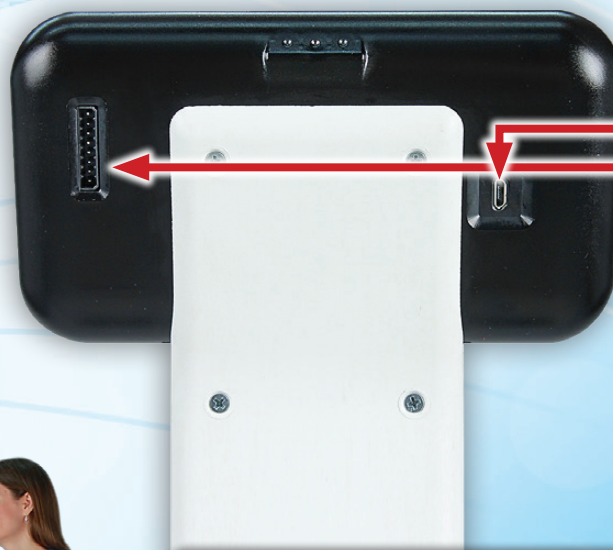

## CONECTIVIDAD VERSÁTIL:

- 1 puerto micro USB-B
- 1 puerto serial RS232
- Cumple con HL7 IEEE 11073 (estándar)
- Modelos con Ethernet Wi-Fi disponibles para Registro Médico Electrónico/Registro de Salud Electrónico (EMR/EHR) inalámbrico
- Conectividad con dispositivo Welch Allyn® disponible: CVSM, CSM, y LXI (consulte la tabla de modelos en la página de atrás)

## ENERGÍA



Los modelos apex® están disponibles con un adaptador AC incluido en forma estándar (consulte los modelos en la página de atrás).

Un nivel de burbuja integrado le ayudará a localizar el área más nivelada en su piso.



La cubierta extraíble de la plataforma de las básculas apex® puede ser quitada para su limpieza o para reemplazar las 12 baterías AA.

Toda la base estructural de la báscula está fabricada en forma muy sólida para la óptima seguridad y estabilidad de los pacientes.



| BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO MECÁNICO Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA |                         |                                                                       |              |                |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Modelo                                                                       |                         | APEX                                                                  | APEX-AC      | APEX-WI-AC     | APEX-UWA-AC          | APEX-LXI-AC     |
| Capacidad                                                                    |                         | 600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg                             |              |                |                      |                 |
| Tallímetro                                                                   |                         | Tallímetro mecánico en línea                                          |              |                |                      |                 |
| Medidas del Tallímetro                                                       |                         | 24" (2') - 86" (7'2") x 0.125 in / 60 cm - 218 cm x 1 mm              |              |                |                      |                 |
| DIMENSIONES                                                                  | Dimensiones Generales   | 17" An x 19.5" Pr x 53.3" Al /<br>43 cm An x 49.5 cm Pr x 135.3 cm Al |              |                |                      |                 |
|                                                                              | Tamaño de la Plataforma | 17" An x 17" Pr x 2.75" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al        |              |                |                      |                 |
|                                                                              | LCD                     | Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de alto en el LCD                         |              |                |                      |                 |
| ENERGÍA                                                                      | Baterías                | 12 baterías AA (no incluidas)                                         |              |                |                      |                 |
|                                                                              | Adaptador AC (incluido) |                                                                       | ●            | ●              | ●                    | ●               |
|                                                                              | Puertos                 | 1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B                          |              |                |                      |                 |
| Conectividad                                                                 |                         |                                                                       |              | Ethernet Wi-Fi | Welch Allyn CVSM/CSM | Welch Allyn LXI |
| Peso Neto                                                                    |                         | 31 libras / 14 kg                                                     |              |                |                      |                 |
| Peso de Envío                                                                |                         | 40 libras / 18 kg                                                     |              |                |                      |                 |
| Dimensiones de Envío                                                         |                         | 58 in - 20 in x 6 in /<br>147 cm x 51 cm x 15 cm                      |              |                |                      |                 |
| Código UPC                                                                   |                         | 809161197808                                                          | 809161197907 | 809161198003   | 809161198102         | 809161198201    |

| BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO CON SONAR Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA |                         |                                                                       |              |                |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Modelo                                                                        |                         | APEX-SH                                                               | APEX-SH-AC   | APEX-SH-WI-AC  | APEX-SH-UWA-AC       | APEX-SH-LXI-AC  |
| Capacidad                                                                     |                         | 600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg                             |              |                |                      |                 |
| Tallímetro                                                                    |                         | Tallímetro sin contacto con sonar                                     |              |                |                      |                 |
| Medidas del Tallímetro                                                        |                         | 24" (2') - 86" (7'2") x 0.2 in / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm              |              |                |                      |                 |
| DIMENSIONES                                                                   | Dimensiones Generales   | 17" An x 19.5" Pr x 89.5" Al /<br>43 cm An x 49.5 cm Pr x 227.3 cm Al |              |                |                      |                 |
|                                                                               | Tamaño de la Plataforma | 17" An x 17" Pr x 2.75" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al        |              |                |                      |                 |
|                                                                               | LCD                     | Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de altura en el LCD                       |              |                |                      |                 |
| ENERGÍA                                                                       | Baterías                | 12 baterías AA (no incluidas)                                         |              |                |                      |                 |
|                                                                               | Adaptador AC (incluido) |                                                                       | ●            | ●              | ●                    | ●               |
|                                                                               | Puertos                 | 1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B                          |              |                |                      |                 |
| Conectividad                                                                  |                         |                                                                       |              | Ethernet Wi-Fi | Welch Allyn CVSM/CSM | Welch Allyn LXI |
| Peso Neto                                                                     |                         | 32 libras / 14 kg                                                     |              |                |                      |                 |
| Peso de Envío                                                                 |                         | 41 libras / 19 kg                                                     |              |                |                      |                 |
| Dimensiones de Envío                                                          |                         | 58" – 20" x 6" /<br>147 cm x 51 cm x 15 cm                            |              |                |                      |                 |
| Código UPC                                                                    |                         | 809161197808                                                          | 809161197907 | 809161198003   | 809161198102         | 809161198201    |

