



CMC
INGENIERIA MEDICA

ELECTROCARDIÓGRAFO SE-601

6

Horas, Autonomía
de la batería
Recargable

6

Canales



FDA

CE

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto, portátil y liviano.

Pantalla LCD táctil a color de 5,6 pulgadas.

Visualización de las 12 derivadas.

Algoritmo SEMIP® avanzado para mediciones e interpretación automáticas Almacenamiento de datos de paciente: 800 ECG.

Detección y alerta de desconexión.

Teclado físico alfanumérico.

Múltiples modos de trabajo.

Filtros digitales de ECG.

Protección contra descarga de desfibrilador.

Impresora térmica incorporada de alta resolución.

Compatibilidad con software manejo de datos SE-1515 (opcional).

Compatible con papel térmico 110mmx140mmx150 paginas.

www.cmcimgmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Compatibilidad con software de manejo de datos SE-1515 (opcional).

Permite centralizar, almacenar, mostrar, analizar, exportar, importar, administrar los datos del electrocardiógrafo en el PC y conexión al sistema PACs, CIS o HIS para integrar datos clínicos, permitiendo asociar hasta 254 electrocardiógrafos a través de una red Wifi o LAN.



Operación de un solo toque

A través de la pantalla táctil de 5,6 pulgadas y del panel teclado.



Diseño compacto, liviano y portátil

Los modelos SE-601 son fáciles de transportar gracias al asa ergonómica, lo que facilita su adaptación a diversas necesidades de aplicación.




Muestreo simultáneo de 12 derivaciones

Aunque está diseñado con una impresora térmica de 6 canales, el SE-601 toma muestras de las 12 derivaciones simultáneamente y puede presentar informes de 12 canales a través de impresoras USB o archivos PDF.




Teclas de atajo

Una serie de teclas de acceso directo están preparadas para un acceso rápido a las funciones de uso común.

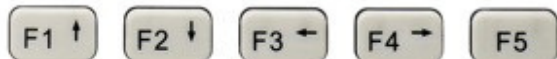

Exportación de estudios en formato PDF

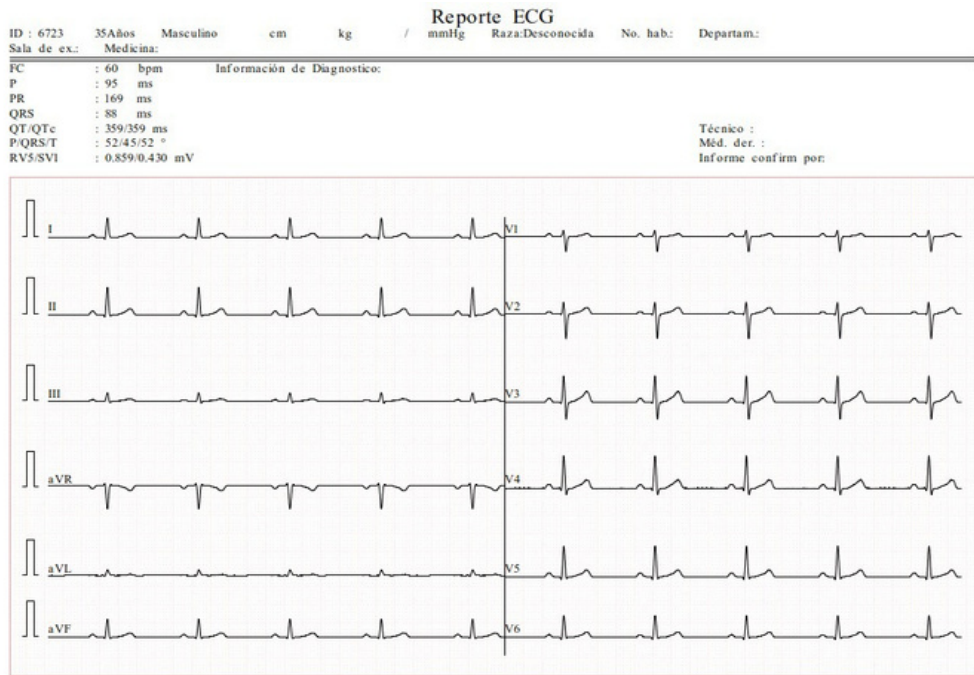

VISTAS DEL EQUIPO



ACCESORIOS QUE INCLUYE

Cable Ekg SE Edan.

Chupas Ekg set x 6.

Pinzas Ekg set x 4.

Batería litio Ekg.

Papel térmico.

Soporte de papel.

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681